

ROTAID™
AED CABINETS



SYLLABUS **2025**

01.100.01

Rotaïd Grundwerte

Unsere Mission bei Rotaïd ist klar:

„Wir wollen weltweit zum Symbol für einen lebensrettenden Defibrillator werden.“

Um dies zu erreichen, basieren unsere Produkte und unser Unternehmen auf unseren 3-Prinzipien:



Schnell

Bei einem Herzstillstand zählt jede Sekunde. Deshalb sind unsere Produkte schnell auffindbar, zeitsparend im Einsatz und können an Einsatzorten installiert werden, um einen Unterschied zu machen.



Einfach

Damit jeder einen Defibrillator nutzen und helfen kann, sollten unsere Schränke intuitiv, komfortabel, unkompliziert und beruhigend einfach sein.



Nachhaltig

Durch den Einsatz modernster Technologie und recycelter Materialien erfüllen unsere Produkte höchste Standards in Bezug auf ökologische und soziale Verantwortung.



"Rotaïd ließ sich vom Rettungsring inspirieren und erkannte dessen einfache, aber wichtige Eigenschaft. Sein Zweck und seine Anwendung sind universell verständlich."

Inhalt

Produktinformationen

Rotaid Core values
Seite. 2

Rotaid Quality
Seite 4

Comparison Table
Seite. 5

Zubehör

Rotaid - Backboard
Seite. 22

Rotaid - Totem
Seite. 24

Revisionsnummer:
01.100.01

Produkte

Rotaid - 24/7
Seite. 6



Rotaid - Solid Plus Alarmed
Seite. 11



Rotaid - Solid Plus Heat Alarmed
Seite. 16



Rotaid-Qualität

Rotaid AED-Schränke wurden strengen Tests unterzogen, um die Qualität der Defibrillatorlagerung in verschiedenen Innen- und Außenumgebungen sicherzustellen.

Das Programm simulierte extreme Wetterbedingungen, bewertete die Lageranforderungen und die öffentliche Nutzung und berücksichtigte die neuen Anforderungen der AED-Hersteller an die Konnektivität.

Mit der Erfahrung aus über 85.000 Installationen hat **Rotaid einen neuen globalen Standard gesetzt**. Dieser Bericht fasst die Tests und Ergebnisse zusammen und erläutert ihre Bedeutung.

Eurofins, ein weltweit führender Anbieter wissenschaftlicher Dienstleistungen mit über 200.000 validierten Methoden, und seine Tochtergesellschaft EAG Laboratories mit 40 Jahren Erfahrung in der Materialprüfung, haben die Qualität der Rotaid-Lösungen objektiv bestätigt.



IP56
Schutzart



IK10
Stoßfestigkeit




-20 Celsius
Frostschutz



Doppelter UV-Schutz



Salznebelschutz

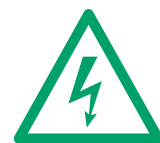

Sicherer 24-Volt-Betrieb



DSGVO-konform



EU-MDR-konform



CE-konform

Vergleichstabelle



**Solid Plus
Alarmed**



**Solid Plus Heat
Alarmed**



**Rotaid
24/7**

Anwendung

- Für den Innenbereich
- Für den Außenbereich (ohne Frost)
- Für den Außenbereich (mit Frost)



Qualitätsstandards

- IP56
- IK10
- Salznebelschutz
- UV-Schutz
- Keine WLAN- oder Mobilfunksignalstörungen
- Frostschutz bis -20 °C



Funktionen

- Akustisches Alarmsystem
- Heizsystem
- LED-Beleuchtung
- Optisches Alarmsystem



Rotaid Smart Services

- AED-Selbsttest-Fehlererkennung
- Notrufsystem
- AED-Anwesenheitserkennung
- Schranköffnungs-/Schließerkennung
- GPS-Ortung
- Verwaltung der Ablaufdaten von AED und Zubehör
- Webbasiertes Managementportal
- SMS-/E-Mail-Benachrichtigungssystem
- Integrierte SIM-Karte mit globaler Konnektivität





Rotaid™

24/7

Rotaid 24/7

Produktblatt

Der Rotaid 24/7 AED-Schrank kombiniert robusten Schutz mit fortschrittlicher, intelligenter Fernüberwachungstechnologie und stellt sicher, dass Ihr AED stets zugänglich und einsatzbereit ist. Er kann im Innen- und Außenbereich aufgestellt werden, um die Reichweite Ihrer lebensrettenden Ausrüstung zu maximieren.

Seine einzigartige runde Form und die erkennbare LED-Beleuchtung machen ihn Tag und Nacht gut sichtbar und auffindbar. Der transparente Deckel ist mit einem großen AED-Logo, vier Hinweis- und hervorgehobenen Pfeilen zur Orientierung sowie acht Vertiefungen für maximalen Halt bei jedem Wetter versehen.

Eine schnelle und intuitive Drehung genügt für einen superschnellen und leichten Zugriff auf die lebensrettende Ausrüstung. Ein einstellbares akustisches und optisches Alarmsystem warnt Umstehende und schützt Ihre Investition. Die extrem robuste Konstruktion ist auf extreme Langlebigkeit ausgelegt, hält rauen Wetterbedingungen stand, bietet einen robusten Stoßschutz und das Heizsystem schützt die AED vor Frost bis -20 °C. Die branchenführende Schutzart IP56 bietet bestmöglichen Schutz vor Wasser, Salznebel und Staub.



Der Rotaid 24/7-Schrank verfügt über eine integrierte SIM-Karte, die zuverlässige, globale Konnektivität über 2G- und 4G-Netze (CAT-M1) bietet.





Die GPS-Antenne registriert und kartiert die Position automatisch auf Google Maps und erkennt und meldet, wenn der Schrank an einen neuen Standort bewegt wird.



Retten Sie mehr Leben mit Rotaid 24/7

Mit **Rotaid Smart Services** bietet der 24/7-Schrank **erweiterte Fernüberwachungsdienste**, die Ihr lebensrettendes System ständig überwachen und Sie innerhalb von Sekunden benachrichtigen, wenn das System in Betrieb ist, gewartet werden muss oder Ihre sofortige Aufmerksamkeit erfordert.

Dank dieser Technologie ist Ihr lebensrettender AED im Notfall immer einsatzbereit.

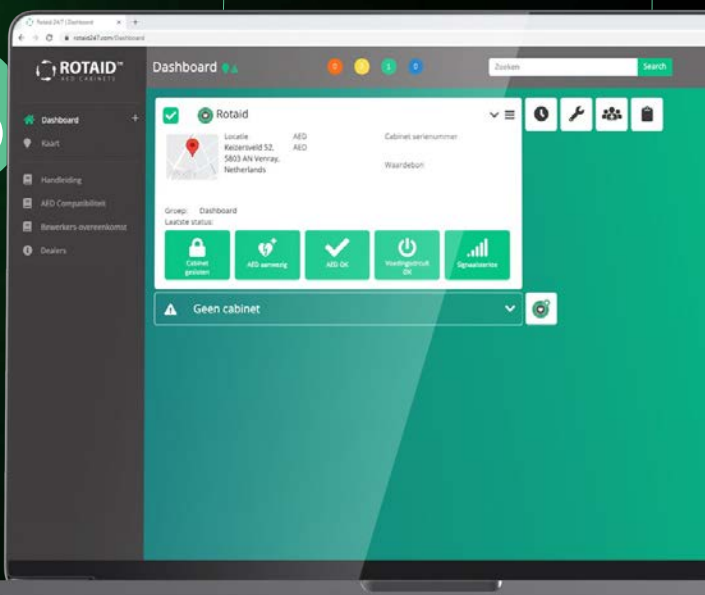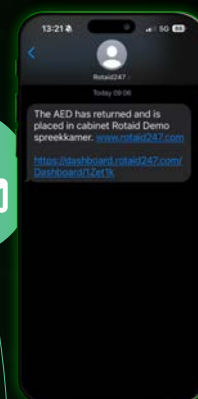

Hauptmerkmale



24/7-Fernüberwachung von AED und Schrank

Die fortschrittliche, bewährte und validierte Technologie des Rotaid-Schranks erkennt sofort einen Selbsttestfehler Ihres AED, das Ablaufdatum der Elektroden und der Batterie sowie den Wartungsbedarf. Sie erkennt außerdem die Entnahme (und Rückgabe) des AED aus dem Schrank sowie das Öffnen (und Schließen) des Schranks. Das GPS-System markiert und kartiert den Standort Ihrer lebensrettenden Ausrüstung.



Anpassung

Personalisieren Sie die Farb- und Alarmeinstellungen Ihres Schranks nach Ihren Wünschen, Ihrem Branding oder Ihrer Umgebung. Erweitern Sie Ihren AED mit Fernüberwachungsfunktionen. Passen Sie die Einstellungen jederzeit und so oft an, wie Sie möchten.



Webbasiertes Verwaltungsportal und Zugriff

Überwachen und verwalten Sie den Status Ihres AED jederzeit und überall über das Online-Überwachungssystem und erhalten Sie Benachrichtigungen von Ihrem Netzwerk lebensrettender Ausrüstung. Verwalten Sie Service- und Wartungsanforderungen, laden Sie Berichte herunter, ändern und passen Sie Ihr Netzwerk an und verwalten Sie Ihr Einsatzteam.



Echtzeit-Benachrichtigungen

Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, um über den Status Ihres Netzwerks informiert zu sein – sowohl in Ihrem Portal als auch per E-Mail oder SMS, unabhängig vom bevorzugten Kommunikationsgerät. Legen Sie pro Person oder Schrankgruppe eine Gruppe von Benachrichtigungsempfängern fest, um eine schnelle, effektive und sofortige Reaktion zu gewährleisten.



Zugriff für mehrere Benutzer

Gewähren Sie verschiedenen Benutzern Zugriff auf die Überwachung und Verwaltung Ihrer AED und erstellen, ändern und passen Sie Ihre Rettungsteams per Knopfdruck an.



API-Integration

Nahtlose Verbindung mit Ihren bestehenden Systemen für die automatisierte Informationsübermittlung oder mit einer externen Quelle Ihres AED-Programms.

Farboptionen



Rotaid™ 24/7


Datenblatt

Anwendung

Für den Innen- und Außenbereich

Abmessungen

Länge: 48 cm
Breite: 48 cm
Tiefe: 18 cm
Gewicht: 4 kg

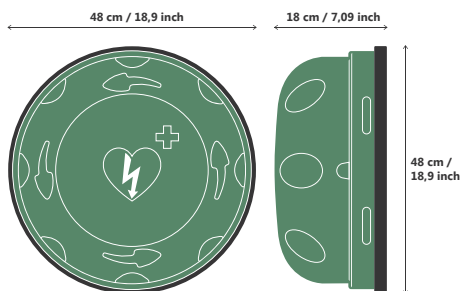

Rückplatte

- 100 % Polycarbonat, UV-stabilisiert, Carbonfaser-Oberfläche
- Wasserdichte Gummidichtung für die Netzkabelverlegung
- ABS-Montageblock zur Platzierung des AED
- 4 versenkte Befestigungslöcher zur Befestigung an der Struktur
- Massiver Stahlhaken zur Befestigung von Schildern oder Siegeln
- Gedruckte Installationsanleitung

Deckel

- 100 % Polycarbonat, doppelt UV-beschichtet, grün-transparent, IR-Schutzschicht
- Weißes ILCOR AED-Logo in der Mitte
- 4 Richtungspfeile zur Benutzerführung
- 8 Vertiefungen bieten Halt beim Öffnen
- Münzgroßer, schwacher Magnet zur Alarmauslösung

Kompatibilität

Bitte scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die AED-Kompatibilität zu überprüfen, oder gehen Sie zu:

www.rotaid.com/aed-compatibility



Qualität

Schutzart : IP56 (IEC 60529)
Stoßfestigkeit : IK10Plus (IEC 60529) IEC 62262
Salznebeltest : Bestanden. Norm: IEC 60068-2-52
Signalstörungen : Keine Störungen mit 2G/3G/4G/5G / WLAN / Bluetooth

AED-Frostschutz : -20 °C
Prüfstelle : Eurofins

CE-zertifiziert
EN60601-1-1 / EN60601-1-2:2015 Ed4 / EN55011:2009 + A1:2010 / EN61000-4-2 / EN61000-4-3 / EN61000-4-4 EN61000-4-5 / EN61000-4-6 / EN61000-4-7 / EN61000-4-8 / EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Prüfstelle : BICON Laboratories

Elektrisch

Elektrische Sicherheit : Prüfung gemäß IEC 60335-1 bestanden
Heizsystem : 92 W Gesamtleistung / automatischer Thermostat

Trafo : 90 W AC/DC
Industrieadapter – MeanWell

Eingangsspannung : 100–240 V, 2,5 A (2,5 A), 50–60 Hz
Ausgangsspannung : 24 V DC, 5 A (5 A)
Abmessungen Trafo : 145 x 60 x 32 mm (L x B x H)

Sicherheitsnormen Trafo
• UL60950-1 / CSA C22.2 / TÜV EN60950-1 / BSMI CNS 14336 / CCC GB4942 / PSE J60950-1
• AS/NZS 60950.1 / BIS IS 13252 / KC K60950 / EAC TP TC 004 / SIRIM MS IEC60950


Kommunikation

Netzwerk : 2G, 4G (LTE-M, CAT-M1), weltweite Abdeckung
GPS : GPS-Antenne, echtes Signal
Alarm : 84 dB oder 98 dB, gemessen in 1 Meter Entfernung vom Lautsprecher

Verpackung

Befestigungsmaterial, Montageschablone und Handbuch im Lieferumfang enthalten.

Kartongröße: 50 x 50 x 40 cm, FSC-zertifiziert, 100 % Recyclingkarton.

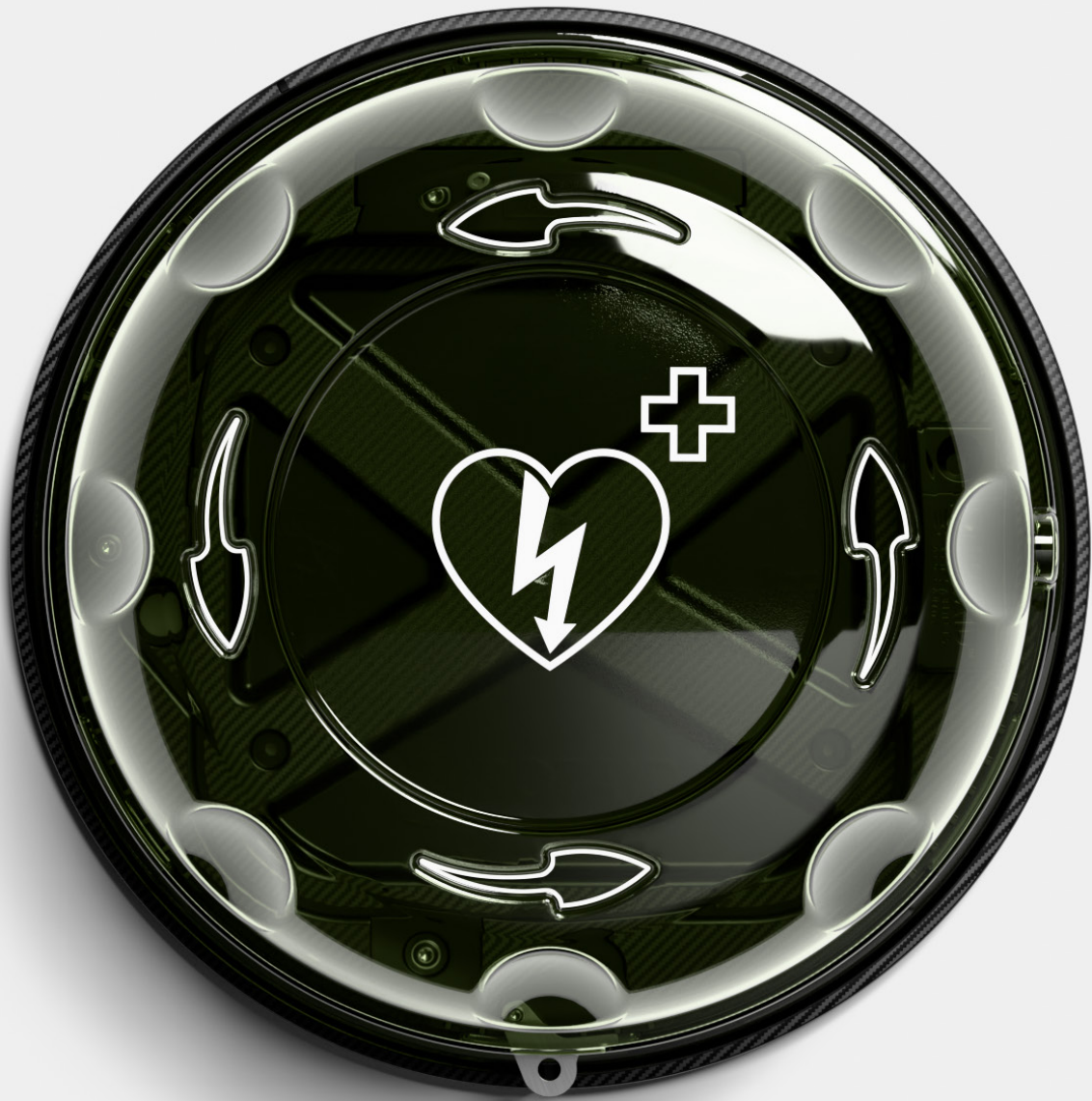

Rotaid™

Solid Plus Alarmed

Rotaïd Solid Plus Alarmed

Produktblatt

Der Rotaïd Solid Plus Alarmed ist ein äußerst robuster und langlebiger AED-Wandschrank, der eine erkennbare, stabile und nachhaltige Aufbewahrung Ihres AED-Geräts gewährleistet.


Die charakteristische runde Form und das Design erleichtern das Auffinden, und eine schnelle Drehung genügt, um vollen Zugriff auf den AED zu erhalten. Der Deckel ist mit AED-Logos und Richtungspfeilen versehen, sodass kein Interpretationsspielraum besteht.

Der Schrank lässt sich durch eine intuitive Drehung öffnen, wodurch der gesamte Deckel abgenommen wird. Der Helfer hat somit vollen Zugriff auf den AED und kann ihn schnell und einfach greifen. Der Deckel ist über einen Gurt an der Rückplatte befestigt und benötigt keine weitere Aufmerksamkeit des Helfers. Ein Edelstahlhaken an der Unterseite des Schanks dient zur Befestigung von Siegeln, Etiketten oder anderen Geräten.

Der Deckel, ausgestattet mit Aussparungen für optimalen Halt und Richtungspfeilen, besteht aus 100 % Polycarbonat.

Er bietet zuverlässigen Schutz und ist hochgradig wasser- und staubdicht. Der Deckel ist mit UV-Filtern ausgestattet, um dauerhafte Transparenz zu gewährleisten. Verfärbungen, Rost und Ablagerungen werden vermieden.



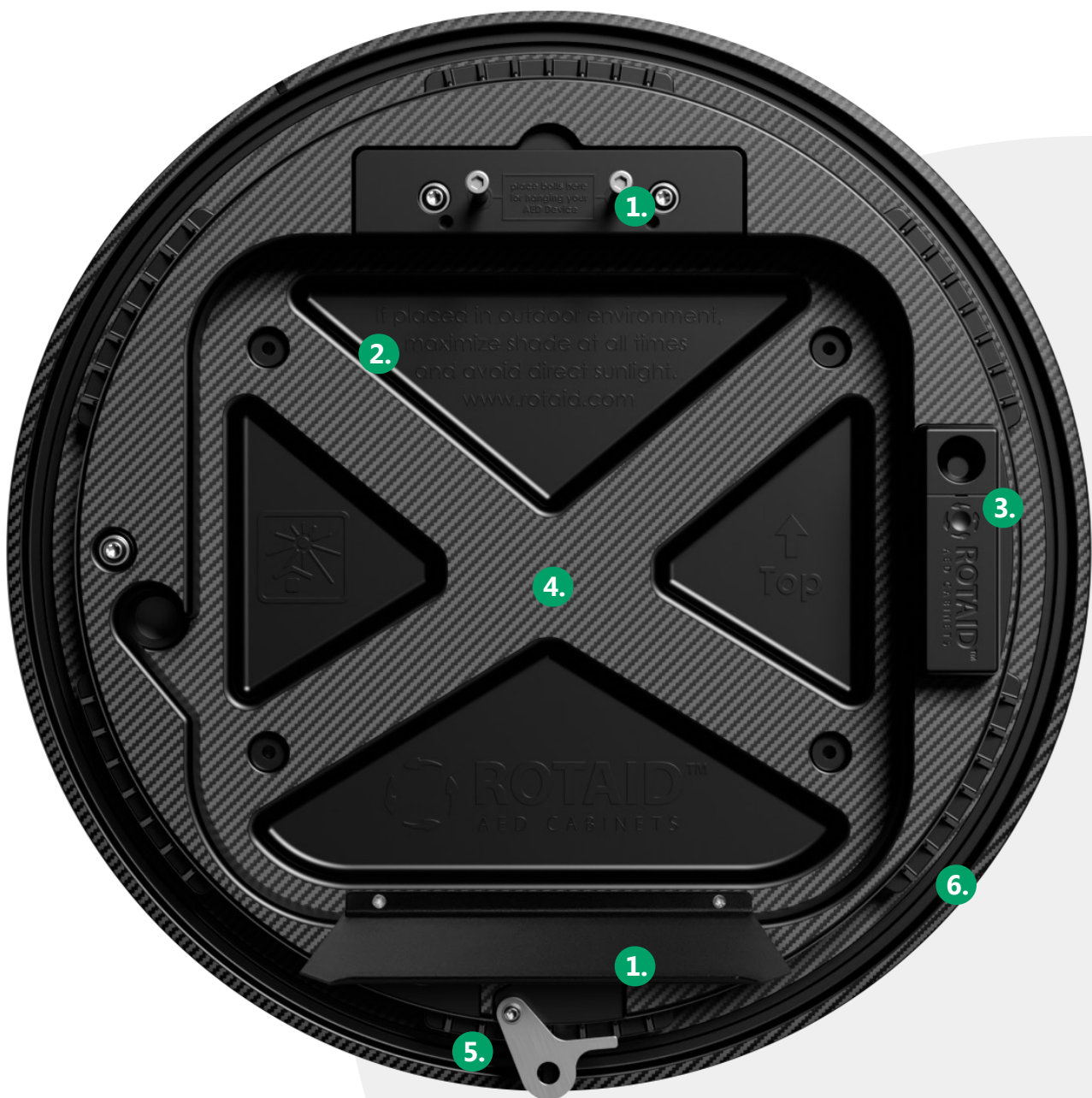

- | | |
|--|---|
| 1. Ablage oder Halterung für Defibrillator | 4. Oberfläche in Carbonoptik |
| 2. Montageanleitung | 5. Stabiler Stahlhaken |
| 3. Akustisches Alarmsystem | 6. 100 % UV-stabilisierter Polycarbonat-Kunststoff (recycelt) |



Branchenführende Qualitätsstandards

IP56	Geschützt vor begrenztem Staubeintritt und geschützt vor schwerer See und starkem Strahlwasser.
IK10	Geschützt gegen einen Aufprall von 20 Joule für höchste Robustheit.
UV	Doppelte UV-Filter und Stabilisatoren sorgen für ein langlebiges, hochwertiges Erscheinungsbild.
Salznebel	Vollständig geschützt und korrosionsbeständig durch Salznebel.
Interferenzen	Keine Interferenzen mit WLAN, Bluetooth oder Mobilfunkprotokollen, sodass die Speicherung eines angeschlossenen Geräts möglich ist.
Geprüft von Experten	Alle Standards wurden von der Prüfstelle Eurofins (www.eurofins.com) geprüft und zertifiziert.

Farboptionen

Transparent grün und transparent grün mit roter, grüner oder gelber Umrandung



Rotaid Solid Plus Alarmed


Datenblatt

Anwendung

Für den Einsatz in allen Innenräumen.
Für den Einsatz im Außenbereich, sofern die Temperatur nicht unter 5 Grad Celsius fällt.

Abmessungen

Länge	: 48 cm
Breite	: 48 cm
Tiefe	: 18 cm
Gewicht	: 1,8 kg

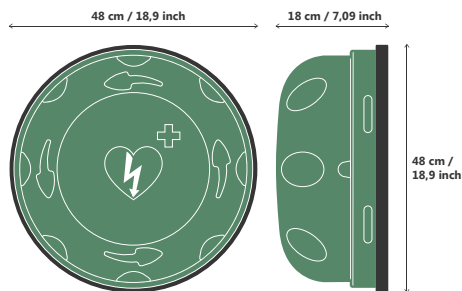

Rückplatte

- 100 % Polycarbonat, UV-stabilisiert, Carbonfaser-Oberfläche
- ABS-Montageblock und Ablage zur Platzierung des AED
- 4 versenkte Befestigungslöcher zur Befestigung an der Struktur
- Massiver Stahlhaken zur Befestigung von Schildern oder Siegeln
- Gedruckte Installationsanleitung

Deckel

- 100 % Polycarbonat, doppelte UV-Beschichtung
- Weißes ILCOR AED-Logo in der Mitte
- 4 Richtungspfeile zur Benutzerführung
- 8 Vertiefungen bieten Halt beim Öffnen
- Münzgroßer, schwacher Magnet zur Alarmauslösung

Kompatibilität

Bitte scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die AED-Kompatibilität zu überprüfen, oder gehen Sie zu:

www.rotaid.com/aed-compatibility



Akustisches Alarmsystem

- ABS-Gehäuse
- Einstellbare Lautstärke: 84 dB und 98 dB
- Rote Taste zum vorübergehenden Unterbrechen des Alarms
- Stromversorgung über zwei AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- Alarm wird sofort beim Öffnen des Gehäuses ausgelöst

Modularität

Kompatibel mit allen AEDs.

Aufrüstbar mit Rotaid Heizsystem
oder Rotaid 24/7-Konnektivitätsmodul.

Verpackung

Befestigungsmaterial, Montageschablone und Handbuch im Lieferumfang enthalten.

Kartongröße: 50 x 50 x 25 cm.

FSC-zertifiziert, 100 % Recyclingkarton.



Rotaid™

Solid Plus Heat Alarmed

Rotaid Solid Plus Heat Alarmed

Produktblatt

Der Rotaid Solid Plus Heat Alarmed ist ein äußerst robuster und langlebiger AED-Wandschrank, der eine erkennbare, stabile und nachhaltige Aufbewahrung Ihres AED-Geräts im Außenbereich gewährleistet.

Die charakteristische runde Form und das Design erleichtern das Auffinden. Mit nur einer kurzen Drehung erhalten Sie vollen Zugriff auf den AED. Der Deckel ist mit AED-Logos und Richtungspfeilen versehen, sodass keine Interpretationsspielräume bestehen.

Der Schrank lässt sich in wenigen Sekunden durch eine intuitive Drehung öffnen, wodurch der gesamte Deckel abgenommen wird. Der Helfer hat vollen Zugriff auf den AED und kann ihn schnell und einfach greifen. Der Deckel ist mit einem Gurt an der Rückplatte befestigt und benötigt nach dem Öffnen keine weitere Aufmerksamkeit. Ein Edelstahlhaken an der Unterseite des Schanks dient zur Befestigung von Siegeln, Etiketten oder anderen Geräten.

Der Deckel, ausgestattet mit Aussparungen für optimalen Griff und Richtungspfeilen, besteht aus 100 % Polycarbonat. Er bietet zuverlässigen Schutz und ist hochgradig wasser- und staubdicht.

Der Deckel ist mit UV-Filtern ausgestattet, um dauerhafte Transparenz zu gewährleisten. Optische Beeinträchtigungen, Rost und Rückstandsbildung sind ausgeschlossen.





- | | |
|--|--|
| 1. Ablage oder Halterung für den AED | 4. Automatisches Heizsystem |
| 2. Akustisches Alarmsystem | 5. Edelstahlhaken |
| 3. 8 LEDs für optimale Auffindbarkeit und Sichtbarkeit rund um die Uhr | 6. 100 % UV-stabilisierter Polycarbonat-Kunststoff (recycelt), Oberfläche in Carbonoptik |

Vollautomatisches Heizsystem für frostfreie AED-Lagerung bis -20 Grad Celsius

Das maßgeschneiderte Heizsystem sorgt dafür, dass der AED auch bei Frost im Betriebstemperaturbereich bleibt. 8 LED-Leuchten sorgen dafür, dass der Schrank auch im Dunkeln schnell gefunden werden kann. Das gesamte System arbeitet vollautomatisch und ist einfach zu installieren.

Alle Materialien sind im Außenbereich getestet und bieten dauerhaften Schutz für AED und Schrank. Der Schrank ist durch ein akustisches Alarmsystem geschützt.

Branchenführende Qualitätsstandards

IP56	Geschützt vor begrenztem Staubeintritt und geschützt vor schwerer See und starkem Strahlwasser.
IK10	Geschützt gegen einen Aufprall von 20 Joule für höchste Robustheit.
UV	Doppelte UV-Filter und Stabilisatoren sorgen für ein langlebiges, hochwertiges Erscheinungsbild.
Salznebel	Vollständig geschützt und korrosionsbeständig durch Salznebel.
Interferenzen	Keine Interferenzen mit WLAN, Bluetooth oder Mobilfunkprotokollen, sodass die Speicherung eines angeschlossenen Geräts möglich ist.
Frostschutz	Frostschutz für den AED bis -20 Grad Celsius
Geprüft von Experten	Alle Standards wurden von der Prüfstelle Eurofins (www.eurofins.com) geprüft und zertifiziert.



Farboptionen

Transparent grün und transparent grün mit roter, grüner oder gelber Umrandung



Rotaid Solid Plus Heat Alarmed


Datenblatt

Anwendung

Für den Außenbereich

Abmessungen

Länge	: 48 cm
Breite	: 48 cm
Tiefe	: 18 cm
Gewicht	t: 3,2 kg

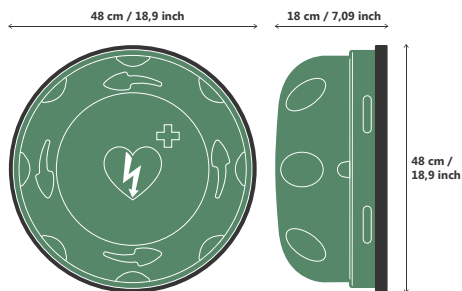

Rückplatte

- 100 % Polycarbonat, UV-stabilisiert, Carbonfaser-Oberfläche
- Wasserdichte Gummidichtung für die Netzkabelverlegung
- ABS-Montageblock und -Ablage zur Platzierung des AED
- 4 versenkte Befestigungslöcher zur Befestigung an der Struktur
- Massiver Stahlhaken zur Befestigung von Schildern oder Siegeln
- Gedruckte Installationsanleitung

Deckel

- 100 % Polycarbonat, doppelte UV-Beschichtung
- Weißes ILCOR AED-Logo in der Mitte
- 4 Richtungspfeile zur Benutzerführung
- 8 Vertiefungen bieten Halt beim Öffnen
- Münzgroßer, schwacher Magnet zur Alarmauslösung

Heizsystem

Vollautomatisches Heiz- und Betriebssystem
 8 LEDs zur Beleuchtung
 24-Volt-Stromversorgung
 Niedriger Stromverbrauch
 CE-zertifiziert: NEMKO NO75757

Kompatibilität

Bitte scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die AED-Kompatibilität zu überprüfen, oder gehen Sie zu:
www.rotaid.com/aed-compatibility



Elektrisch

Elektrische Sicherheit	: Prüfung gemäß IEC 60335-1 bestanden
Heizsystem	: 92 W Gesamtleistung / automatischer Thermostat
Trafo	: 90-W-AC/DC-Industrieadapter – MeanWell
Eingangsspannung	: 100–240 V, 2,5 A (2,5 A), 50–60 Hz
Ausgangsspannung	: 24 VDC, 5 A (5 A)
Abmessungen Trafo	: 145 x 60 x 32 mm (L x B x H)

Sicherheitsnormen Trafo

- UL60950-1 / CSA C22.2 / TÜV EN60950-1 / BSMI CNS 14336 / CCC GB4942 / PSE J60950-1
- AS/NZS 60950.1 / BIS IS 13252 / KC K60950 / EAC TP TC 004 / SIRIM MS IEC60950

Modularität

Kompatibel mit allen AEDs.

Aufrüstbar mit Rotaid 24/7-Konnektivitätsmodul.

Permanente Stromversorgung erforderlich.

Verpackung

Befestigungsmaterial, Montageschablone und Handbuch im Lieferumfang enthalten. Transformator, Kabel und Steckersatz im Lieferumfang enthalten.
 Kartongröße: 50 x 50 x 25 cm.
 FSC-zertifizierter, 100 % recycelter Karton.





Rotaid
Zubehör

Rotaid

Zubehör – Hinweisschild

Das Rotaid Hinweisschild sorgt für mehr Aufmerksamkeit für Ihre Rettungs-ausrüstung. Es ist ein wertvolles Hilfsmittel, um Passanten und Helfer zu unterweisen, Sponsoren zu danken oder Aufmerksamkeit zu wecken.

Ihre einzigartige Form fügt sich nahtlos in den Rotaid-Schrank ein und ergibt eine auffällige Kombination mit hochwertiger Optik und robuster Haptik. Die maßgeschneiderten Schilder werden von unserem hauseigenen Designteam nach Ihren individuellen Anforderungen entworfen und sorgen dafür, dass sie sich harmonisch in Standort, Umgebung und Publikum einfügen.

Außerdem können Sie darauf Anleitungen, Kontaktdaten und Ihr Logo platzieren.

Das aus Trespa gefertigte und mit speziellem UV-Lack bedruckte Hinweisschild eignet sich für den Innen- und Außenbereich und behält sein hochwertiges Aussehen über viele Jahre.

Eigenschaften

- Hochwertiges Trespa-Material (10 mm)
- UV- und witterungsbeständiger Druck
- Vorgebohrte Befestigungslöcher
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Design

- Einzigartiges, maßgeschneidertes Design
- Entworfen von unseren Spezialisten
- In allen Sprachen verfügbar



Spezifikationen

Zubehör – Hinweisschild

Abmessungen

Länge: 41 cm / 16,14"
 Breite: 48 cm / 18,90"
 Tiefe: 0,8 cm / 0,31"
 Gewicht: 2 kg / 4,41 lbs

Abmessungen mit Rotaid-Wandschrank

Länge: 89 cm / 35,04"
 Breite: 48 cm / 18,90"
 Tiefe: 18 cm / 7,10"
 Gewicht: 8,7 kg / 19,18 lbs



Rotaïd

Zubehör – Totem

Das Rotaïd-Totem ermöglicht die eigenständige Installation Ihres Defibrillators im Innen- und Außenbereich. Die robuste Konstruktion und das hochwertige Design sorgen dafür, dass Ihr Defibrillator in nahezu jeder Umgebung und Situation gut auffällt und sicher platziert werden kann.

Der modulare Aufbau ermöglicht eine einfache Installation, und das Totem lässt sich für Schulungs- und Messezwecke problemlos demontieren.

An Vorder-, Rück- und Oberseite des Totems können Informations- und Branding-Panels angebracht werden. Diese Panels werden individuell nach Kundenwunsch und Standort gefertigt und sorgen dafür, dass sich das Totem perfekt in seine Umgebung einfügt.

Die Rotaïd-Schränke sind sicher am Totem montiert, und die robuste Stahlkonstruktion ermöglicht die Installation in anspruchsvollsten Umgebungen. Die doppelte Pulverbeschichtung sorgt für ein langlebiges Erscheinungsbild.

► Für den Innen- und Außenbereich

► Stabile und sichere Konstruktion

► Aufbewahrungsbox für Transformatoreinheit

Anwendung

- Schulungen und Messen
- Freistehende Installationen
- Standorte ohne Wandmontagemöglichkeit
- Außeninstallationen
- Vermietung und Eventgestaltung

Design

- Maßgeschneidertes Design
- UV-geschützter Vollfarbdruck
- Für die feste Bodenmontage geeignet
- Kombinierbar mit allen Rotaïd-Schränken



Spezifikationen

Zubehör - Totem

Abmessungen

Gesamt

Gesamtbreite: 700 mm / 27,5"
Höhe: 1615 mm / 63,6"
Gewicht: 40 kg / 88 lbs

Fußplatte

Breite: 700 mm / 27,56" rund
Stärke: 5 mm / 0,2"
Material: Stahl, pulverbeschichtet

Stützen / Standrohr

Breite: 560 mm / 22,05"
Höhe: 1715 mm / 67,52"
Stärke Rohr: 60 mm / 2,36"
Material: Stahl, pulverbeschichtet

Panel

Breite: 394 mm / 15,51"
Höhe: 1043 mm / 41,06"
Material: Dibond, 3 mm stark / 0,12"

Module

1. Sonnendach

Der perfekte Schutz für maximalen Schatten.

2. Hinweisschild (Sonderanfertigung)

Für zusätzliche Hinweise und Anweisungen.

3. Paneel (Sonderanfertigung)

Werben Sie mit einem individuell angefertigten Hinweisschild für Ihre Stele.

4. Zusätzliche Farbe

In allen Farben erhältlich.

Artikelnummern

30.9000

Rotaid-Totem mit Standfuß und Frontschild.

30.9000 + 30.0001

Rotaid-Totem mit Standfuß, Frontschild und Hinweisschild.

30.9001

Rotaid-Totem mit Standfuß, Frontschild und Schiebedach.



